



NACTUS


日進医療器株式会社

〒481-8681 愛知県北名古屋市沖村権現35-2
TEL 0568-21-0635 FAX 0568-23-2787

本カタログに掲載の価格(希望小売価格)は諸事情により変更
となる場合がありますのでご了承ください。品質向上の為、予告
なく仕様を変更する場合がありますのでご了承ください。
「NACTUS」は日進医療器(株)の登録商標です。



Webサイト

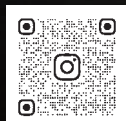

Instagram

Wheelchair Collection Vol.02



前に進み続ける人へ。

半世紀以上車椅子づくりを追求し続けてきた日進医療器が、
技術を結集したシリーズ、NACTUS。

それは強く、軽く、美しい。

車椅子ユーザーの快適さを叶える、新たなコレクションです。

できることをやるのではなく、やりたいことをやる。
行ける場所に行くのではなく、行きたいところに行く。

私たちが目指すのは、あなたが人生への情熱を持って
前に進み続けることです。

NACTUSとともに生きることで、毎日をもっと豊かになる。
ぜひ、あなたらしさを表現する1台に、出会ってください。



Active model

日常用車いす

P.06	NCT-FS Muina
P.10	NCT-FS
P.14	NCT-AS
P.18	NCT-VS
P.22	NCT-MS
P.26	NCT-PRO

Sports model

スポーツ用車いす

P.30	NCT-Basketball
P.32	NCT-Tennis
P.33	NCT-Racing
P.34	NCT-Chair Ski
P.35	Others

Option item

オプションアイテム

P.36	Ⓐ車輪 / Ⓑタイヤ
P.38	Ⓒハンドリム / Ⓓブレーキ / Ⓔキャストフォーク
P.40	Ⓕキャストホイール / Ⓖ押し手グリップ / Ⓗサイドガード
P.42	Ⓘフットサポート / ⓵アームサポート / ⓓその他

Parts color

パーツカラー

P.44	パーツカラー
------	--------

Accessories・goods

アクセサリ・グッズ

P.46	日常用車いす関連
P.48	スポーツ用車いす関連 / NACTUS Apparel / 空気入れ

Frame color

フレームカラー

P.50	フレームカラー
------	---------



NCT-FS Muina

チタン製 軽さ 強さ デザイン性

チタン素材の圧倒的な軽さ、強さ。

他にはない軽量さを実現。毎日を軽やかにサポートするチタン製の車いすは、
シンプルなデザインとチタン独特の輝きも魅力です。



新素材チタン使用

NCT-FS Muina

補装具車椅子 | モジュラー

耐荷重 : 100kg
参考重量 : 10.8kg
基本価格 : フォールディング 折りたたみ
546,000円～(非課税)

Options
24インチスピナジー B,LXL ブラック／
シュウルベワン／チタン長円ハンドリム／
チタンサイドガード／SGホイール／SG
フォーク／DAアジャスタブル／フォール
ディンググリップ／NCTチタンアームサ
ポート／バックサポート張り調整式／各
部パーツカラー指定(チタングレー)／座
クッション



Webサイトで
見る



軽くて強く、錆びない。
存在感のある輝きが魅力です。



軽い	「軽量」の特性で知られるチタン製のフレームにより、アルミニウムを超える軽量化を実現しました。
強い	強度にも優れたチタン製フレームは、壊れにくく、耐久性に優れます。
錆びない	アルミニウムよりも耐食性にすぐれたチタンは、錆びにくさにおいて最高レベルの金属材料です。

Point



フレーム形状

ベースパイプのないクラシックフレームにより、スマートな外観を実現。スマートな印象を演出します。



フレームサイズ展開

座面がフラットに近いαフレームと、座面に傾斜のあるβフレームの2種類をラインナップ。身体の状態に合わせたフレームを選択できます。



軽量


チタンフレームによりトップクラスの軽さを実現。自動車への積み込みを容易に行うことができます。

Spec

シート幅	36、38、40cmから選択。＊バックパイプ外々寸
フレーム長	50cm(αフレーム)、53cm(βフレーム)
シート奥行	30～40cmから選択(2cmピッチ)
車軸前後位置	5cm(βフレーム)、7cm(αフレーム)
前座高	42.5cm
後座高	35.5cm(βフレーム)、38.5cm(αフレーム)
フットサポート・シート間距離	36、37.5、39cmから選択

バックサポート高	26cm～40cmから選択(2cmピッチ)
バックサポート角度	88°(座から背)
キャンバ角	0°、3°から選択
キャスタ輪径	4インチ
駆動輪径	24インチ(540)
レッグパイプ絞り	あり(シート幅＝11cm)、ストレートから選択
ベース長	53.5cm(αフレーム)、55cm(βフレーム)

Drawing

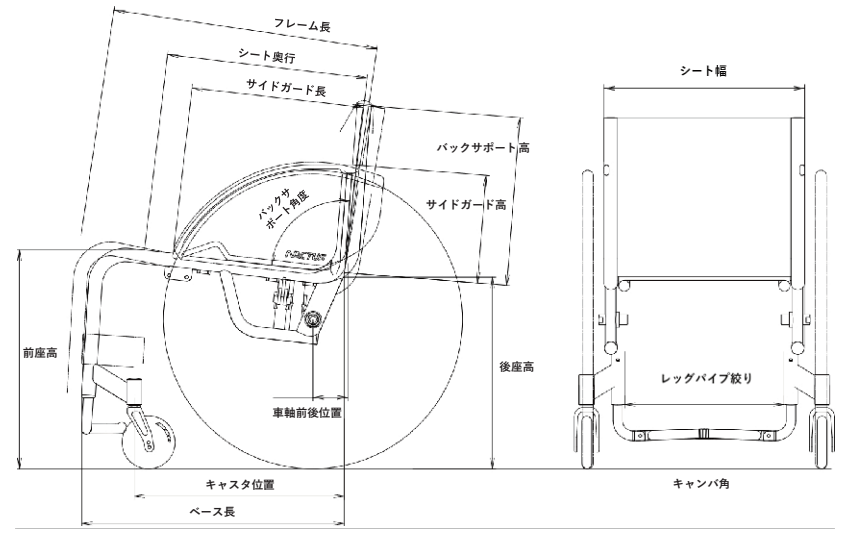



NCT-FS

カスタマイズOK

デザイン性

シンプルなフレーム&自由なカスタマイズ。

muinaと同様のデザインで、カスタマイズを可能にしました。高いデザイン性と
お身体へのフィット感、双方を追求するユーザーへおすすめの1台です。



スタイリッシュなアルミニウム製フレーム

NCT-FS

補装具車椅子 | オーダーメイド



フォールディング (折りたたみ)

リジッド (固定)

耐荷重 : 100kg
参考重量 : 10.1kg
基本価格 : フォールディング (折りたたみ)
382,000円～(非課税)
: リジッド (固定)
382,000円～(非課税)



Webサイトで
見る

Options

楕円ハンドリム/24インチスピナジー B.LXL ホワイト/シュワルベライトランブル
/カーボンサイドガード/SGホイール/SGフォーク/バックサポート張り調整
式/各部パーツカラー指定/レッグパイプカバー/座クッション

フレームカラー : NACTUSブルー(フォールディング)、ブラウン(リジッド)

大径アルミニウムパイプによる スタイリッシュなクラシックフレーム。

大径(Φ30)アルミパイプ1本形状によるスタイリッシュかつシンプルなフレーム設計。ベース部にパイプがなく、すっきりした見た目ながらも剛性を確保した、存在感のあるフレームワークです。NISSINが最も得意とするオーダーメイドのノウハウにより、様々な寸法を指定してのカスタムフレームオーダーも可能です。




Point



Φ30アルミパイプ

Φ30大径パイプで存在感のあるスタイリッシュな雰囲気を演出。フレームカラーが映え、パイプを手で握りやすく、プッシュアップ動作にも安心です。

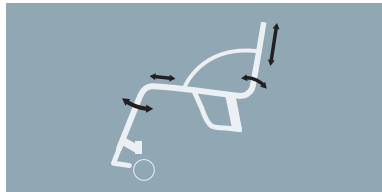

フレームオーダー対応

各部寸法を指定してのカスタムオーダー対応が可能です。身体寸法や生活環境に合わせた1台を製作できます。



固定車選択

折りたたみ式の他、固定車を選択することもできます。固定車にすることで、さらに軽量となり、剛性と操作性も向上します。


Spec

シート幅	34、36、38、40、42cm、その他も可 ※バックパイプ外々寸
フレーム長	48、50、52、54cm、その他も可
シート奥行	34、36、38、40cm、その他も可
車軸前後位置	2、3、4、5、6、7cm、その他も可
前座高	41、42、43、44、45cm、46cm、その他も可
後座高	36、37、38、39、40cm、その他も可
フットサポート・シート間距離	30～40cm、その他も可

バックサポート高	30、32、34、36、38、40cm、その他も可
バックサポート角度	86、88、90、92、94°、その他も可(座から背)
キャンバ角	0°、3°から選択
キャスト輪径	3、4、5インチ
駆動輪径	22、24、25インチ
レッグパイプ絞り	あり(シート幅-12cm)、ストレートから選択
ベース長	48、50、52、54、56cm、その他も可

※寸法の組み合わせによっては製作できない場合がございます

Drawing

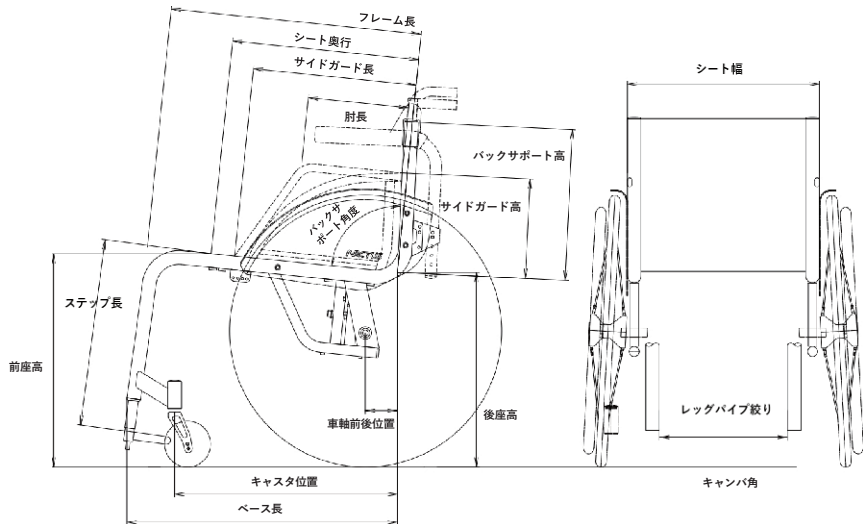



NCT-AS

フルオーダー

強さ

経験者向き

このフィット感は、世界にただ1台。

お身体を採寸し、ライフスタイルに合わせて製作するフルオーダーの車いす。
どこまでもあなたに寄り添う1台を、日進医療器の技術を結集してかたちにします。



メインパイプ径 22mmを使用の軽量タイプ

NCT-AS Light

補装具車椅子 | オーダーメイド

耐荷重 : 75kg

参考重量 : 9.9kg

フォールディング **折りたたみ** リジッド **固定**

基本価格 : 364,000円～(非課税)

Options アルミハードアルマイトハンドリム/24インチ スピナジー LX ブラック/バナレーサースベックActive/カーボンサイドガード/4インチ幅広クッションアルミキャスタ/DAアジャスタブル/NCTアームサポート/バックサポート張り調整式/各部パーツカラー指定/座クッション

フレームカラー : キャンディーパープル



Webサイトで
見る



メインパイプ径 25mmを使用の標準タイプ

NCT-AS Urban

補装具車椅子 | オーダーメイド

耐荷重 : 100kg

参考重量 : 10.6kg

フォールディング **折りたたみ** リジッド **固定**

基本価格 : 364,000円～(非課税)

Options アルミハードアルマイトハンドリム/24インチ スピナジー LX ブラック/バナレーサースベックActive/カーボンサイドガード/4インチ幅広クッションアルミキャスタ/DAアジャスタブル/フォールディンググリップ/NCTアームサポート/バックサポート張り調整式/各部パーツカラー指定/座クッション

フレームカラー : キャンディーパープル



メインパイプ径 25mmを使用のショックアブソーバー搭載タイプ

NCT-AS Shock absorber

補装具車椅子 | オーダーメイド

耐荷重 : 100kg

参考重量 : 11.6kg

リジッド **固定**

基本価格 : 850,000円～(非課税)


Options アルミハードアルマイトハンドリム/24インチ スピナジー LX ブラック/バナレーサースベックActive/アルミタイヤールサイドガード/4インチ幅広クッションアルミキャスタ/DAアジャスタブル/NCTアームサポート/バックサポート張り調整式/各部パーツカラー指定/座クッション

フレームカラー : ダークグレー



Point

フレームワーク例

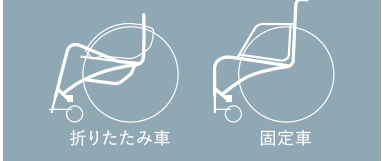

フルオーダーメイド

理想のフレーム形状で身体とライフスタイルにジャストフィット。フルオーダーによるフレーム設計。



メインフレーム形状

まるでアーチを描くような曲線美を持つフレームワーク。フラットタイプとアップの選択が可能。



Shock absorber サスペンションシステム

両駆動輪のFOX製エアーススペンションが極上の乗りごちを実現します。付属のエアerpンプで空気圧を調整可能。


Spec

シート幅	34、36、38、40、42cm、その他も可 *バックパイプ外々寸	バックサポート高	30、32、34、36、38、40cm、その他も可
フレーム長	48、50、52、54cm、その他も可	バックサポート角度	86、88、90、92、94°、その他も可(座から背)
シート奥行	34、36、38、40cm、その他も可	キャンバ角	0°、3° から選択 *Light 折りたたみは3°不可
車軸前後位置	4、5、6、7cm、その他も可	キャスタ輪径	3、4、5インチ
前座高	41、42、43、44、45cm、その他も可	駆動輪径	22、23、24、25インチ *Shock absorberは24インチのみ
後座高	36、37、38、39、40cm、その他も可	レッグパイプ絞り	あり(シート幅=7cm(Light)、=8cm(Urban, Shock Absorber)
フットサポート・シート間距離	30～40cm、その他も可	ベース長	48、50、52、54、56cm、その他も可

※寸法の組み合わせによっては製作できない場合がございます

Drawing

*NCT-AS Light の図面です。Urban, Shock absorberは発注マニュアルをご確認ください。

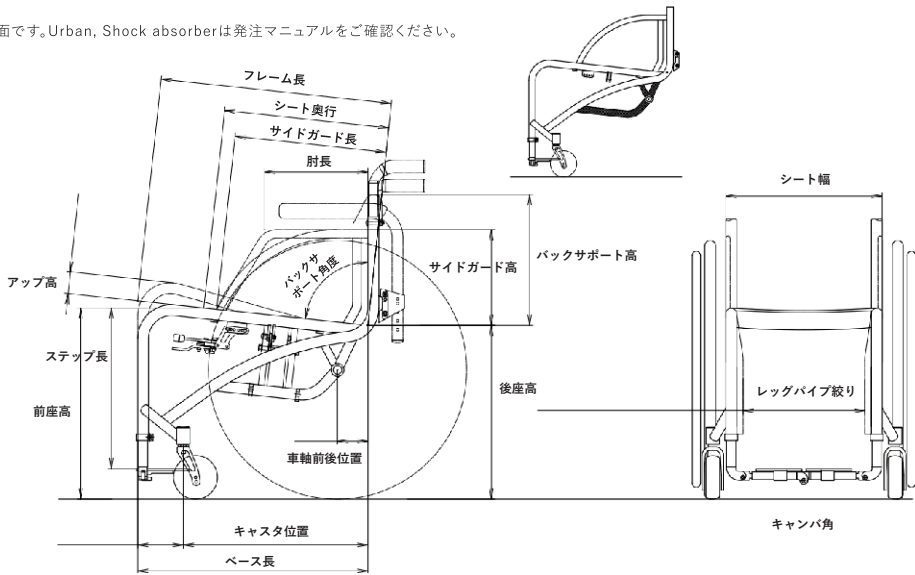



NCT-VS

強さ デザイン性

「強さ」と「スタイリッシュ」を兼ね備える。

剛性の高い異形フレームが特徴。スタイリッシュなデザインと調整可能な
バランスの良さを備え、車いすユーザーの満足を追求しました。



スタイリッシュさと選択機構のバランス

NCT-VS

補装具車椅子 | モジュラー

耐荷重 : 100kg
参考重量 : 10.4kg
基本価格 : フォールディング 折りたたみ
281,000円～(非課税)

Options

バックサポート張り調整式／24インチスピナ
ジー B.LXL ホワイト／バナレーサースペック
Active／楕円ハンドリム／SGフォーク／SG
ホイール／カーボンサイドガード／座クッ
ション



フレームカラー : キャンディーブルー

高いデザイン性と剛性を持つ、
独自形状のルーリエパイプによる、
流れるような美しいアーチ形状のベースライン。

強度に優れた特殊形状のルーリエパイプをフレームベース部に使用。さらに、そのベースパイプをアーチ曲線ラインにすることにより、高い剛性を確保。そのスタイルは流れるような動きをイメージさせ、かつ実際にそのイメージ通りの操作感を実現しています。上方からは細くスマートに見えつつ、側方からのビジュアルでは独特のインパクトを持つフレームワークは、特徴的でありながら様々な方に受け入れられます。



Point



フレーム形状

ベース部はルーリエパイプによるアーチ形状のベースライン。剛性も確保し、スムーズに流れるようなビジュアルと操作感を実現しています。



座面の高さ・前後位置の選択

車軸部分の機構により、座面高と車軸前後位置を選択しての発注を可能にしています。



レッグパイプ絞りの選択が可能


レッグパイプ絞りありの仕様も選択可能。スマートなフロントデザインを実現します。

Spec

シート幅	34、36、38、40cmから選択 *バックパイプ外々寸
フレーム長	50cm
シート奥行	36、37、38、39、40cmから選択
車軸前後位置	5、6、7、8cmから選択
前座高	42cm(後座高:37cm)、44cm(後座高:39cm)から選択
後座高	37cm(前座高:42cm)、39cm(前座高:44cm)から選択
フットサポート・シート間距離	29～35cm *前座高42cmの場合、34、35cmは不可

バックサポート高	34、36、38、40cmから選択
バックサポート角度	84°(座から背)
キャンパ角	0°、3°から選択
キャスト輪径	4インチ
駆動輪径	24インチ(540)
レッグパイプ絞り	あり(シート幅=8cm)、ストレートから選択
ベース長	53cm

Drawing

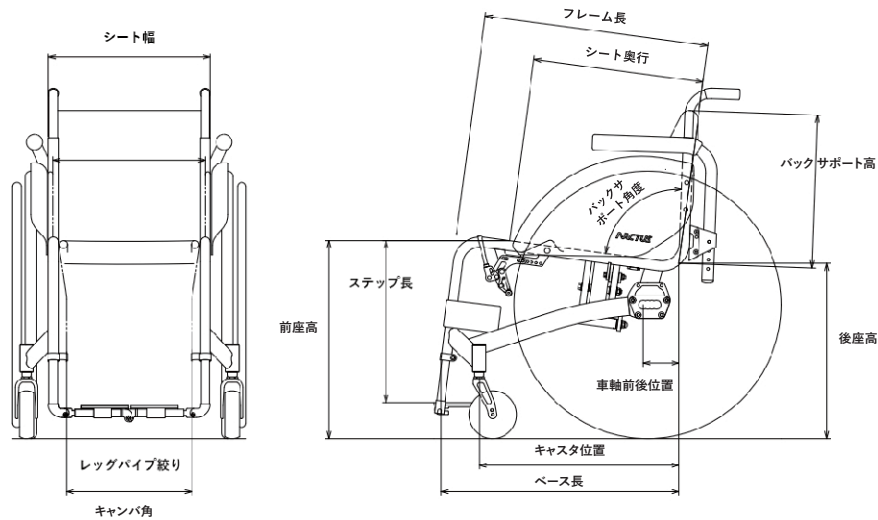



NCT-MS

リーズナブル

選択OK

初心者向き

初めての車椅子に、最適なモデル。

座面の高さや椅子の前後位置選択を行えるから、これからお身体が成長していく
若い方にも安心。リーズナブルな価格で、最初の1台にぴったりです。



メインパイプ フロント部をアップ

NCT-MS UP

補装具車椅子 | モジュラー

耐荷重 : 100kg

参考重量 : 11.6kg

フォールディング 折りたたみ

基本価格 : 189,000円～(非課税)

Options アルミハードアルマイトハンドリム／スタンダードホイール24インチ 着脱式／バナレーサースペックActive／4インチ幅広クッションアルミキャスタ／NCTブレーキ／NCTアームサポート／バックサポート張り調整式／各部パーツカラー指定／座クッション

フレームカラー : さくら



Webサイトで
見る



メインパイプ ストレート形状

NCT-MS Urban

補装具車椅子 | モジュラー

耐荷重 : 100kg

参考重量 : 11.1kg

フォールディング 折りたたみ

基本価格 : 189,000円～(非課税)

Options アルミハードアルマイトハンドリム／バナレーサースペックActive／アルミタイヤアールサイドガード／4インチ幅広クッションアルミキャスタ／NCTアームサポート／バックサポート張り調整式／各部パーツカラー指定／座クッション

フレームカラー : フォーマルブルー



レッグパイプの着脱、スイングイン・アウトが可能

NCT-MS SW

補装具車椅子 | モジュラー

耐荷重 : 100kg

参考重量 : 12.0kg

フォールディング 折りたたみ


基本価格 : 209,000円～(非課税)

Options アルミハードアルマイトハンドリム／スタンダードホイール24インチ 着脱式／バナレーサースペックActive／4インチ幅広クッションアルミキャスタ／NCTアームサポート／バックサポート張り調整式／各部パーツカラー指定／座クッション

フレームカラー : フォーマルブルー



Point

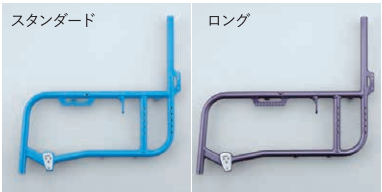

フレーム長設定

フレーム長はスタンダード・ロングの2種類。身体寸法に合わせて選択することができます。



座面の高さ・前後位置の選択

車軸部分の機構により、座面高と車軸前後位置を選択しての 発注を可能にしています。



樹脂製サイドガードの安定性向上

樹脂製サイドガードの取り付けには専用アルミプレートを使用。従来品に比べ、安定性が向上しています。


Spec

シート幅	30,32,34,36,38,40cmから選択 ＊バックパイプ外々寸
フレーム長	標準:47cm(SWは49cm)、ロング:52cm(SWは54cm)から選択
シート奥行	34,36,38,40,42cmから選択 ＊標準フレームの場合、40,42cmは不可
車軸前後位置	3,4,5,6cmから選択 ＊SWは標準フレームの場合、5,6cmは不可
前座高	41,42,43,44,45cmから選択 ＊後座高によっては不可の場合あり
後座高	36,37,38,39,40,41cmから選択 ＊前座高によっては不可の場合あり
フットサポート・シート間距離	30～40cm

バックサポート高	30,32,34,36,38,40cmから選択
バックサポート角度	90°(座から背)
キャンバ角	0°、3°から選択 ＊固定軸は不可
キャスタ輪径	3,4,5インチ
駆動輪径	22,24インチ
レッグパイプ絞り	ストレート
ベース長	標準:50.5cm～53cm(SWは53～55.5cm)、 ロング:55.5cm～58cm(SWは58～60.5cm)

※寸法の組み合わせによっては製作できない場合がございます

Drawing

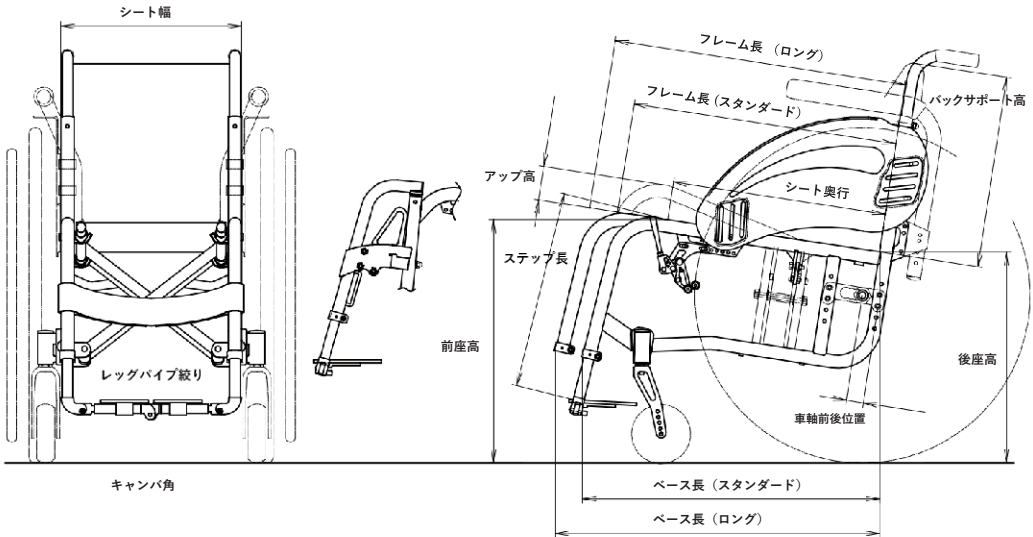



NCT-PRO

電動ユニット

デザイン性

カスタマイズOK

上質な電動車いすの新たなかたち。

シンプルで美しいフレームと、心に寄り添う滑らかな動きが魅力です。指先のわずかな感覚に応えるその操作性は、まるで思いがそのまま形になるよう。電動車いすユーザー待望の、上質な一台です。



待望の電動モデル登場

NCT-PRO

補装具電動車椅子 | 簡易形モジュラー

耐荷重 : 100kg
参考重量 : 25.7kg
基本価格 : **NCT-PRO UP**
フォールディング 折りたたみ
202,700円～(非課税)
: **NCT-PRO Urban**
フォールディング 折りたたみ
202,700円～(非課税)
: **NCT-PRO SW**
フォールディング 折りたたみ
217,800円～(非課税)

Options

DAアジャスタブル／フォールディンググ
リップ／NCTアームサポート／バックサ
ポート張り調整式／アルミフレームサイド
ガード／座クッション／スポーツカバーク
リアブラック



Webサイトで
見る

フレームカラー : オリーブ

上記金額の他、対応電動ユニットと取付工賃の金額が必要です。



対応電動ユニット

販売店様へ:専用発注書にてご発注ください。*画像は20インチ



JWG-1
22インチ、24インチ
一体型・介助操作部なしの場合
新車注文時:
437,800円～(非課税)
(取付工賃含む)



JWX-2
22インチ、24インチ
ニッケル水素バッテリー・標準
タイヤ・ハンドリムコーティン
グなしの場合
新車注文時:
429,600円～(非課税)
(取付工賃含む)

※上記金額には消費税は含まれておりません。※駆動輪未装着での購入時には別途消費税が必要となります。

Point




フレーム形状

NCT-MSのフレームデザインを踏襲。電動走行に
も対応する高強度と、スタイリッシュさを両立した
フレームワークを実現。



フレームオーダー対応

サイドガードなど各部寸法を指定してのカスタム
オーダー対応が可能です。身体寸法や生活環境に
合わせた1台を製作できます。

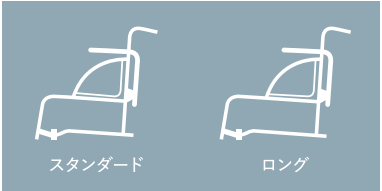


フレーム長設定

フレーム長はスタンダード・ロングの2種類。身体
寸法に合わせて選択することができます。

Spec

シート幅	30、32、34、36、38、40、42、44、46cmから選択 *サイドガードパイプ内々寸	バックサポート高	30、32、34、36、38、40、42、44、46、48、50cmから選択
フレーム長	標準:47cm、ロング:52cm	バックサポート角度	90°(座から背)
シート奥行	34、36、38、40、42cmから選択 *標準フレームの場合、40、42cmは不可	キャンパ角	0°
車軸前後位置	0cm	キャスタ輪径	5インチ
前座高	41、42、43、44、45cmから選択 *後座高によっては不可の場合あり	駆動輪径	22、24インチ
後座高	36、37、38、39、40、41cmから選択 *前座高によっては不可の場合あり	レッグパイプ絞り	ストレート
フットサポート・シート間距離	30～40cm	ベース長	標準:49cm～53cm (SWは52～56cm) ロング:54cm～58cm (SWは57～61cm)

Drawing

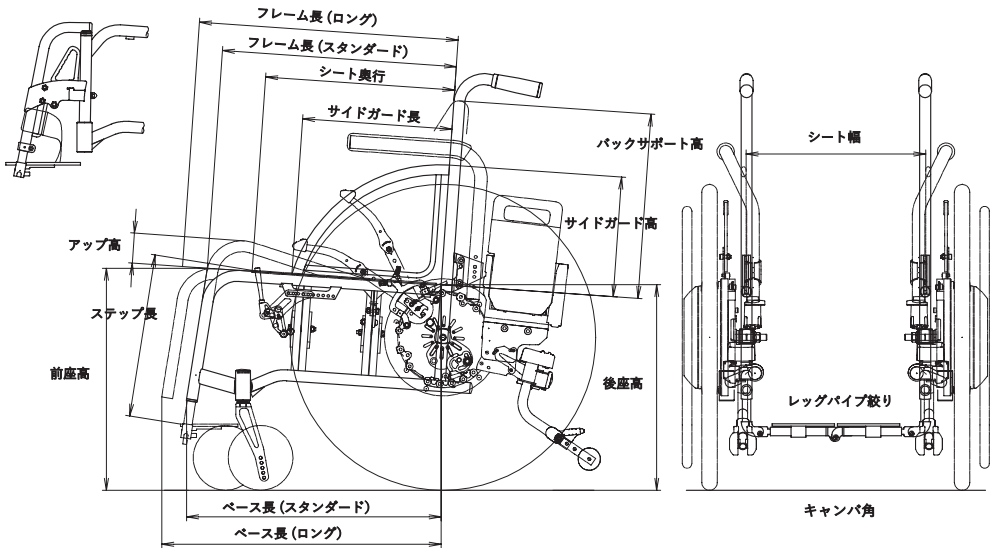

▶ オプション・アクセサリ・フレームカラーについてはP34～をご参照ください。

自分のプレイをイメージ通りに実現できる、抜群の一体感。

for Basketball

補装具車椅子 | オーダーメイド

剛性に優れた、フルオーダー方式による
自分だけの究極の一台。

NCT-BT FO

リジッド **固定**
基本価格 : **411,400**円～(非課税)
ホイール未装着車 : 409,960円～(税込)
キャンパ角 : 14,16,18,20°

Photo／オプション仕様
〈フレーム〉パウダーコーティング(RAL5011
BLPL3/AC)／〈ホイール〉26インチ スピナジー SLX／
〈タイヤ〉20-590パナレーサー ニュートロンスベック
R／スポンサーステッカーエリア／座クッション



Webサイトで
見る



各部寸法の調節が可能なアジャスタブルモデル。

NCT-BT ADJ

リジッド **固定**
基本価格 : **411,400**円～(非課税)
ホイール未装着車 : 409,960円～(税込)
キャンパ角 : 14,16,18,20°

Photo／オプション仕様
〈フレーム〉スーパーホワイト／〈ホイール〉25インチ
スピナジー SLX／〈タイヤ〉20-559パナレーサー ニュ
ートロンスベックR／座クッション



Point



バンパーガード&フットサポート

オフェンスに有効な大型バンパーは、取外し可能なタイプを採用。バンパーガードも標準装備。フットサポートは上下調節可能なクランプ留め式。(FOは固定式も選択可)



バックサポート・座シート

バックサポート・座シートは、面ファスナーにより張り調整可能。バックサポートパイプ上端はバックサポートからは出ません。



各部調節機構(ADJモデル)


ADJモデルは座面高・フットサポート高さ・フットサポート角度が調節可能。(フットサポートの調節機構はFOモデルでも選択可)

Spec

シート幅	FO:フルオーダー、ADJ:30、32、34、36、38、40から選択 *シートサイドパイプ内々
フレーム長	FO:フルオーダー、ADJ:43、47、51cmから選択
シート奥行	FO:フルオーダー、ADJ:28～40cm
車軸前後位置	FO:フルオーダー、ADJ:6～18cm、1.5cm刻み
前座高	FO:フルオーダー、ADJ:40～52cm
後座高	フルオーダー、36cm以上必要
フットサポート・シート間距離	フルオーダー

バックサポート高	フルオーダー、18cm以上必要
バックサポート角度	FO:フルオーダー、ADJ:63～99° 3° 刻み(座から背)
キャンパ角	14、16、18、20°
キャスタ輪径	3インチ
駆動輪径	24、25、26、27インチ
レッグパイプ絞り	FO:フルオーダー、ADJ:ありのみ(バックパイプ内々7.5cm)
ベース長	FO:フルオーダー、ADJ:39、43、46cmから選択 ※寸法の組み合わせによっては製作できない場合がございます

Drawing

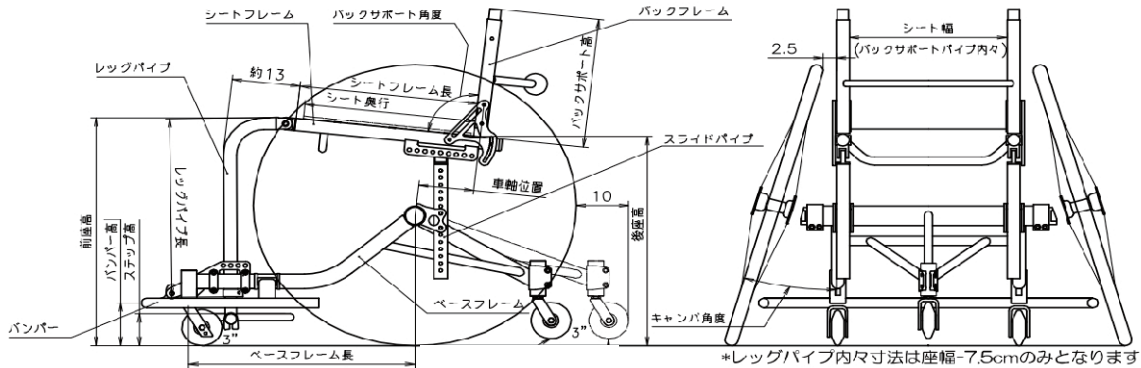

身体とプレイスタイルにフィットする確かな「手応え」

for Tennis

補装具車椅子 | オーダーメイド



剛性に優れた、フルオーダー方式による
自分だけの究極の一台。

NCT-TN FO

リジッド (固定)
基本価格 : 411,400円～(非課税)
ホイール未装着車: 409,960円～(税込)
キャンパ角 : 14,16,18,20,22°

Photo／オプション仕様
〈フレーム〉トウィンクルレッド(カドワキ)／
〈ホイール〉26インチス SLX ブラック／
〈タイヤ〉25-590 IRCエクセレーサー
プロレッド／スビナジー用φ19ハンドリム
／デスク形サイドガード／座クッション



Webサイトで
見る

各部寸法の調節が可能な
アジャスタブルモデル。

NCT-TN ADJ

リジッド (固定)
基本価格 : 411,400円～(非課税)
ホイール未装着車 : 409,960円～(税込)
キャンパ角 : 14,16,18,20°

Photo／オプション仕様
〈フレーム〉グラナダブラック／〈ホイール〉26インチ スビ
ナジー SLX／〈タイヤ〉20-590バナレーサーニュートロ
ンスペックR／座クッション



ADJモデル

座面高調節可



フットサポート角度調節可

前座高、後座高、バックサポート角度、車軸
前出し寸法、フットサポート高調節可能。

スピードのあくなき追及。勝つための装備。

for Racing

補装具車椅子 | オーダーメイド

NCT-RC C model

高品質カーボン製のメインフレームとアルミ製
フォーク・シートフレームの組み合わせが、乗車者の
パワーをロスなくスピードにする剛性と、路面を捉え
る柔軟性を理想的に両立。レース用最高峰モデル。

フレーム価格 : 980,000円～(税抜)

Photo／オプション仕様

〈ハンドル・フォーク〉キャンディーグリーン／
〈ホイール〉前輪 20インチカーボンディープ
リム(CORIMA)後輪 27インチカーボンディ
スクホイール(参考品)／〈参考重量〉約
9.2kg(前輪及び後輪ディスクホイール、膝
マット含む)



Webサイトで
見る



NCT-RC A model

メインフレーム・フォーク・シートフレームとも高
強度アルミ製。フルオーダーによるフィッティングと
造りこみによる、高性能モデル。

フレーム価格 : 498,400円～(税抜)

Photo／オプション仕様

〈フレーム〉キャンディーレッド／〈ホイール〉前輪20インチ
カーボンディープリム(CORIMA)後輪27インチカーボン
ディスクホイール(参考品)／〈参考重量〉約8.2kg(前輪
及び後輪ディスクホイール含む)



レース用ホイール



〈前輪〉
20インチアルミリム
20インチカーボンディープリム(CORIMA)

〈後輪〉
27インチアルミリム
27インチカーボン4本スポーク(CORIMA)
27インチカーボンディスクホイール(CORIMA)

〈ハンドリム〉
パイプ径φ10(mm)リム径 370・380・390・400(mm)
パイプ径φ12(mm)リム径 370・380・390・400(mm)
パイプ径φ14(mm)リム径 370・380・390・400(mm)

NACTUSが誇る世界のチェアスキー

for Chair Ski

世界各国のゲレンデを駆け抜け、スキーヤーたちとともに進化を果たしたNACTUSのレーシングモデルとエキスパートモデル。乗車者の精神力・集中力を確実にスピードに変える。独自のリンク機構とショックアブソーバーのバランスがこれを可能にします。



安定した滑りが幅広いチェアスキーヤーに支持されているレギュラーモデル

NCT-CK Advance

基本価格：646,130円～(税込)

リフトアップロック機構：あり
ビンディング・スキー板別売

Photo／オプション仕様
〈フレームカラー〉アルマイト金／黒(参考カラー)



鋭いターンの動きとシャープな滑りを実現したハイスベックモデル

NCT-CK Racing

基本価格：717,520円～(税込)

リフトアップロック機構：あり
ビンディング・スキー板別売

Photo／オプション仕様
〈フレームカラー〉アルマイト(参考カラー)※アウトリガーは参考品です。



リフトアップロック機構を省き、雪上を滑走することに特化した最上級モデル

NCT-CK Expert

基本価格：741,720円～(税込)

リフトアップロック機構：なし
ビンディング・スキー板別売

Photo／オプション仕様
〈フレームカラー〉アルマイト藍



ソフトボール用車いす

NCT-Softball

補装具車椅子 | オーダーメイド



Webサイトで
見る

基本価格：リジッド **固定** 411,400円～(非課税)

ホイール未装着車：409,960円～(税込)

キャンパ角：14,16,18,20,22°

Photo／オプション仕様
〈フレーム〉パウダーコーティング／〈ホイール〉26インチ スピナジー SLX／〈タイヤ〉23-590
バナレーサーV1／座クッション／腰ベルト・膝ベルト



ツインバスケットボール用車いす

NCT-Twin Basketball

補装具車椅子 | オーダーメイド



Webサイトで
見る

基本価格：リジッド **固定** 411,400円～(非課税)

ホイール未装着車：409,960円～(税込)

キャンパ角：14,16,18,20,22°

Photo／オプション仕様
〈フレーム〉アルマイト金／〈ホイール〉25インチ スピナジー SLX／〈タイヤ〉20-559バナレー
サー ニュートロンスベックR3／座クッション



バドミントン用車いす

NCT-Badminton

補装具車椅子 | オーダーメイド



Webサイトで
見る

基本価格：リジッド **固定** 411,400円～(非課税)

ホイール未装着車：409,960円～(税込)

キャンパ角：14,16,18,20,22°

Photo／オプション仕様
〈フレーム〉つや消しアルマイト黒・アルマイト桃／〈ホイール〉26インチ スピナジー SLX／
〈タイヤ〉23-590バナレーサーV1／座クッション／腰ベルト



スポーツ入門用車いす

NCT-Beginer

補装具車椅子 | モジュラー



Webサイトで
見る

基本価格：リジッド **固定** 351,000円～(非課税)

Photo／オプション仕様

〈フレーム〉ブルーグリーン／座クッション／フロントバンパー

Option item

Webサイトで
見る



※価格については各専用発注書をご確認ください。

A 車輪



スタンダードホイール (NBK・TW)
ハブ・リム・スポークがブラックのスタイリッシュな車輪です。

固定式 **着脱式**
サイズ:24インチ(540)、22インチ(501)
対応機種:全機種
参考重量:NBK/850g、TW/820g(個)
*NBK・TWは機種によって異なります(専用発注書をご確認ください)



● SPINERGY シリーズ
スピナジー LX
耐久性に優れたスポーティーな車輪です。ブラック・ホワイトから選択可。
着脱式
サイズ:24インチ(540)
対応機種:全機種
参考重量:670g(個)



ライトホイール
スタイリッシュな軽量車輪です。
*ステンハンドリム不可。

着脱式
サイズ:24インチ(540)
対応機種:全機種



● SPINERGY シリーズ
スピナジー B.LXL
LXのさらに軽量バージョン。ブラック、ホワイト、レッド、オレンジから選択可。
着脱式
サイズ:24インチ(540)
対応機種:全機種
参考重量:590g(個)



ミズノフルカーボンホイール
スタイリッシュなカーボン製車輪です。

着脱式
サイズ:24インチ(540)
対応機種:全機種
参考重量:860g(個)



● SPINERGY シリーズ
スピナジー SLX
スポーツ車いす用。ブラック、ブルー、イエローから選択可。
着脱式
サイズ:24インチ(540)、25インチ(559)、26インチ(590)
対応機種:全機種
25インチ(559)、26インチ(590)について、NCT-AS Shock absorber、MS、VS、FS Muinaは不可
参考重量:740g(個)

B タイヤ



パナレーサーニュートロン
スベックR3(スリック)



パナレーサーV1(セミスリッ
ク)



パナレーサーニュートロン
スベックLight (スリック)




パナレーサースベック
Active(浅いブロック)



パナレーサーニュートロン
スベックS(浅いブロック)



パナレーサースベックS2
(セミスリック)

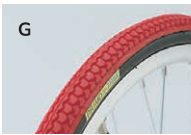

V-TRAK(ブロック)



V-TRAK(セミスリック)



IRCエクセレーサープロ
(セミスリック)



IRCエクセレーサープロ
(スリック)



IRCエクセレーサー
(浅いブロック)



シュワルベマラソンプラス



シュワルベライトラン



シュワルベバワン

*ニュートロンスベックLightはツインバスケットボール以外の競技や日常での使用には向いておりません。

パナレーサー						
※(目安)〈インチ〉						
	品名	サイズ	色	適用リムサイズ※	タイヤパターン	バルブ
A	ニュートロンスベックR3	20-540	アイボリー/レッド	24×1 ⅞	スリック状	米式
		20-559		26×1		
		20-590		26×1 ⅞		
B	V1	23-540	アイボリー	24×1 ⅞	セミスリック状	米式
		23-559		26×1		
		23-590		26×1 ⅞		
C	ニュートロンスベック* (ツインバスケットボール専用)	20-559	イエロー	26×1	スリック状	米式
D	スベックActive	25-540	ブラック	24×1 ⅞	浅いブロック状	米式
E	ニュートロンスベックS	25-501	グレー	22×1 ⅞	浅いブロック状	英式
		25-520	グレー/ブルー	24×1 ⅞		
F	スベックS2	23-540	ブルー/グレー/レッド	24×1 ⅞	セミスリック状	米式

IPR1MO V-TRAK						
※(目安)〈インチ〉						
	品名	サイズ	色	適用リムサイズ※	タイヤパターン	バルブ
G	C-1195	25-540	レッド	24×1 ⅞	ブロック状	英式
		25-540		24×1 ⅞		
		25-590		26×1 ⅞		
H	C-1025	25-540	グレー	24×1 ⅞	セミスリック状	英式
		25-590		26×1 ⅞		
	C-1083	20-559	グレー	26×1	セミスリック状	米式

IRC						
※(目安)〈インチ〉						
	品名	サイズ	色	適用リムサイズ※	タイヤパターン	バルブ
I	エクセレーサープロ	25-540	レッド	24×1 ⅞	セミスリック状	米式
		25-559		26×1		
		25-590		26×1 ⅞		
J	エクセレーサープロ	25-622	レッド	27"スピナジー	スリック状	仏式
K	エクセレーサー	25-501	グレー	22×1 ⅞	浅いブロック状	英式
		25-520		24×1 ⅞		
		25-540		24×1 ⅞		

SCHWALBE						
※(目安)〈インチ〉						
	品名	サイズ	色	適用リムサイズ※	タイヤパターン	バルブ
L	マラソンプラス	25-540	ブラック・グレー	24×1 ⅞	コンビ・トレッド状	米式
M	ライトラン	25-540	ブラック・グレー・ブルー・レッド	24×1 ⅞	セミスリック状	米式
N	ワン	25-540	ブラック	24×1 ⅞	セミスリック状	米式

● ノーパンクタイヤ
ショックスハイポリマータイヤ
SHOX製の耐久性に優れたノーパンクハイポリマータイヤ。カラー「赤・青・黄色・黒・ダークグレー」から選択。
サイズ:24インチ(540)
対応車輪:24インチスピナジー車輪、24インチミズノフルカーボンホイール



Option item

Webサイトで
見る



*価格については各専用発注書をご確認ください。

C ハンドリム



チタン長円ハンドリム

チタン製のスタイリッシュ形状。長円で展開。

ピン間隔: 0.5、1.5cm
対応車輪: 24インチスビナジー、ライトホイール



楕円ハンドリム

手のひらになじみやすく、操作性を向上させるフラット形状のハードアルマイトハンドリム。

ピン間隔: 0.5、1.0、1.5cm
対応車輪: 24、25、26、27インチスビナジー



アルミハンドリム・ハードアルマイトハンドリム

太さ19mm、①アルミハンドリム／②ハードアルマイトハンドリム。

ピン間隔: 0.5~3.0cm(5mm単位)
対応車輪: 全車輪



ナチュラルフィットハンドリム

手のひらになじみやすく、操作性を向上させるフラット形状のハードアルマイトハンドリム。

ピン間隔: 1.0、1.5、2.0cm
対応車輪: 24インチスビナジー、ライトホイール



サージハンドリム LT

手のひらになじみやすく、操作性を向上させるフラット形状のハードアルマイトハンドリム。外周部に滑り止めのゴム付き。

ピン間隔: 1.0、1.5、2.0cm
対応車輪: 24インチスビナジー、ライトホイール



ビニールコーティング(ステンレス)

ビニールでコーティングされた滑り止め付きのハンドリム。

ピン間隔: 0.5~3.0cm(5mm単位)
対応車輪: スタンダードホイール(NBK・TW)

D ブレーキ



NCTブレーキ

旧型のPOSブレーキより軽い力でブレーキをかけられます。ガタもおこりにくくなるように改良しました。

対応機種: 全機種
(MS SW、PRO SWは不可)



PD4ブレーキ

引き掛けのブレーキです。シューの長さは30mm。

対応機種: 全機種



PDAブレーキ

延長レバーが取り付け可能な引き掛けのブレーキです。シューの長さは30mm。

対応機種: NCT-MS、PRO



PPSブレーキ (長・短)

レバー長でロングサイズ(17cm)、ショートサイズ(9cm)から選択可。

対応機種: 全機種
(MS SW、PRO SWは不可)



DA アジャスタブル

ダイヤル式で工具を使用することなくブレーキの前後位置を調整できます。埃も入りにくい仕様です。

対応ブレーキ: NCTブレーキ、PD4ブレーキ、PDAブレーキ

E キャスターフォーク



SGフォーク

キャスタを片方のみで支えることができるフォークです。キャスタホイールがむき出しに見えるよりスタイリッシュに乗っていただけます。


対応機種: NCT-AS、FS、VS、FS Muina



EVO フォーク Aタイプ

アルミ製のスタンダードなキャスタフォークです。

対応機種: 全機種

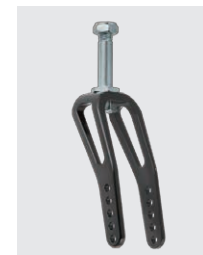

EVO フォーク Bタイプ

アルミ製のスタンダードなキャスタフォークです。ワイドタイプとノーマルタイプから選択可。

対応機種: NCT-AS、MS、FS、PRO


Option item

Webサイトで
見る



*価格については各専用発注書をご確認ください。

F キャスタホイール

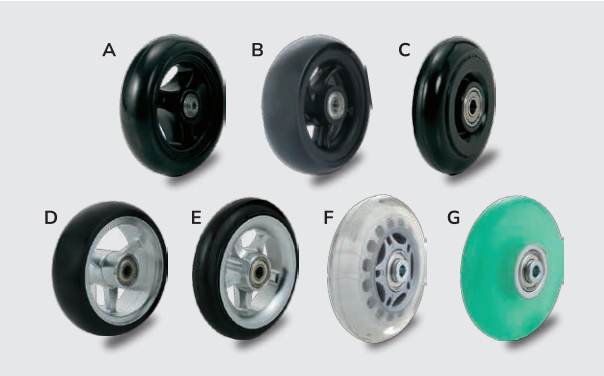

	品名	直径 (mm)	取り付け幅 (mm)	適合フォーク 内々寸法 (mm)
A	5"クッション車輪	130	42	50
B	4"幅広クッション車輪	104	37	40
C	3"クッション車輪	76	24	30/40
D	4"幅広クッションアルミ車輪	104	37	40
E	4"クッションアルミ車輪	101	24	30/40
F	3"ウレタン透明車輪	76	25	30
G	3"ウレタン緑車輪	76	25	30

※D、Eはカラーアルマイト可能



SGホイール

SGフォーク専用のキャスターです。反射板付きです。

4インチ
対応フォーク：SGフォーク



ライトニングホイール

楽しさ広がるカラフルで輝きのあるキャスターホイール。

4インチ
対応フォーク：EVOフォーク Aタイプ・Bタイプ



フロッグレグキャストホイール

適度なクッション性を持つ3本スポークのアルミ削り出しカラーキャスターホイール。高級感を持つ6色のカラーラインナップ。

3インチ幅細、3インチ幅広、4インチ幅細、4インチ幅広
カラー：レッド、ブルー、オレンジ、ゴールド、シルバー、ブラック
対応フォーク：EVOフォーク Aタイプ・Bタイプ

G 押し手グリップ



フォールディンググリップ

押し手が折りたためます。グリップ上面は樹脂特有のなめらかさで快適なさわりごちです。
対応機種：全機種



アール

アール形状の押しハンドルです。S、M、Lの3パターンを用意。VSは押し手高さ調整機能あり。
対応機種：全機種




中間出し

バックパイプの中間部から取り付けられた押しハンドルです。よりスタイリッシュな背中周りとなります。
対応機種：NCT-AS、MS、VS、FS、PRO



アール 背折れあり

アール形状の押しハンドルにバックパイプの折りたたみ機構がついた仕様です。S、M、Lの3パターンを用意。
対応機種：NCT-MS、PRO

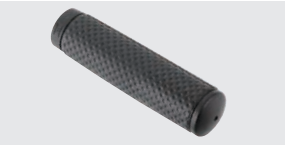

グリップΦ22用

Φ22用。NACTUSの基本グリップ。接着不要タイプもあり。
対応機種：NCT-AS、FS(バックパイプ溶接)、MS(背折れ付き)



直角

バックパイプから直角に設置された押しハンドルです。
対応機種：NCT-AS、MS、VS、FS、PRO



グリップΦ19用

Φ19用のグリップです。
対応機種：全機種

H サイドガード



チタンサイドガード

チタン製のスタイリッシュなサイドガードです。
対応機種：NCT-FS Muina



カーボンサイドガード

カーボン製のスタイリッシュなサイドガードです。
対応機種：全機種(NCT-AS Shock absorberは不可)



樹脂製サイドガード

アール型形状の、フェンダー付き樹脂製のサイドガードです。
対応機種：NCT-AS、MS、VS(Shock absorberは不可)




アルミフレームサイドガード

アルミ板張りで身体をしっかりと支えることができるサイドガードです。形状はタイヤアール・アールデスク型から選択(VSは除く)。お好きなカラーを選択していただけます。
対応機種：NCT-AS、MS、VS、FS、PRO



形状

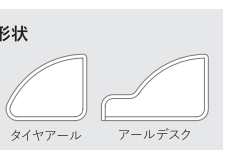

Option item



I フットサポート



中折れ式プレート

角度調整が可能です。

対応機種：全機種（MS SW、PRO SWは不可）



両側跳ね上げ式プレート

角度可変が可能です。

対応機種：NCT-AS(幅決め推奨)、MS、VS、FS(幅決め推奨)、PRO(幅決め取付)



片折れ式プレート

角度可変が可能です。

対応機種：NCT-AS、MS(SW不可)、VS、FS、PRO(SW不可)



折りたたみ時



ステップ板溶接

アルミ枠にアルミ板を溶接します。

対応機種：NCT-AS、FS



パイプ式

折りたたみ式(中折れ)、固定式でも可能です。

対応機種：全機種(MS SW、PRO SWは不可)

J アームサポート



跳ね上げ式



NCTアームサポート

固定式と跳ね上げ式の2種類より選択。高さは28cm～32cmの間で指定可能です。

対応機種：NCT-AS、MS、VS、FS、PRO

* PROのテーブル・スライドブラケット選択時、アームパイプの形状が変更となります。



跳ね上げ式

NCTチタンアームサポート

チタン製のアームサポート。固定式と跳ね上げ式の2種類より選択。高さは28cm～32cmの間で指定可能です。

対応機種：NCT-FS Muina


K その他オプション



キャンバ角

0°か3°で設定が可能です。

対応機種：NCT-AS(Light不可)、MS、VS、FS、FS Muina

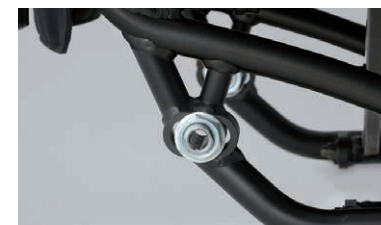

3つ穴ソケット

前後1cmずつの3段階で車軸前後位置を調整可能なユニットです。

対応機種：NCT-AS(Shock absorber、固定車不可)



折りたたみ式転倒防止(ヤマハ)

後方転倒の危険性を少なくするためのものです。ワンタッチで折りたたみ収納が可能です。

対応機種：NCT-AS(Shock absorber不可)、MS、VS、FS



回転式転倒防止NEタイプ

後方転倒の危険性を少なくするためのものです。回転させて内側に収納が可能です。

対応機種：NCT-MS



レッグパイプカバー

メインフレームを保護するためのカバーです。長さには日常用とスポーツ用の2種類。

対応機種：全機種(NCT-MS、PRO SWは不可)



バックサポート 張り調整

面ファスナーベルトによるバックサポートの張り調整が可能です。

対応機種：全機種

Parts color

Webサイトで
見る




*価格については各専用発注書をご確認ください。



対応カラー

アルマイト9色から選択可。艶あり艶なし選択可。
*チタングレーは NCT-FS Muina のみの対応。価格は都度確認。

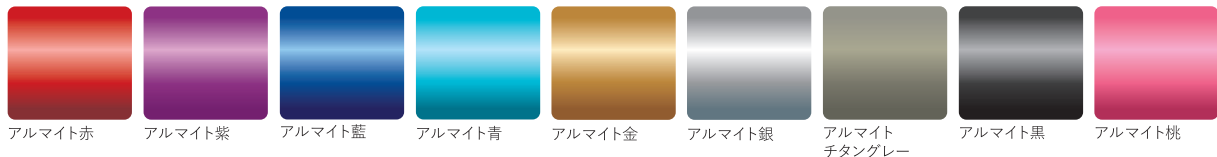

対応可能パーツ

※金額は1台分。艶なしは倍の金額加算。(チタングレー色、スピナジー リム・ハブは除く)



NCTブレーキステー

新車注文時：2,200円(非課税)
標準：ブラック



NCTブレーキ

新車注文時：10,000円(非課税)
標準：ブラック



レッグパイプカラー/クランプ

新車注文時：2,200円(非課税)
標準：ブラック



キャスタアルミホイール/SGホイール

新車注文時：2,800円(非課税)
標準：シルバー(キャスタアルミ)、ブラック(SG)



フットサポート(ポスト含む)

新車注文時：10,000円(非課税)
標準：シルバー



キャスタケースキャップ

新車注文時：2,200円(非課税)
標準：ブラック



キャスタフォーク

新車注文時：2,200円(非課税)
標準：ブラック




アルミハンドリム/ スピナジー用楕円ハンドリム

新車注文時：9,200円(非課税)
標準：シルバー



スピナジー LX/SLX リム

新車注文時：42,000円(非課税)
標準：ブラック

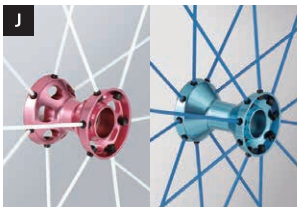

スピナジー LX/SLX ハブ

新車注文時：42,000円(非課税)
標準：シルバー (ブラックスポーク)、ブラック
(ホワイト・ブルー・イエロースポーク)



アームサポートホルダー

新車注文時：2,200円(非課税)
標準：ブラック



NCTアームサポート

新車注文時：2,800円(非課税)
標準：ブラック




日常用車いす関連



Carewill レインウェア

車いす利用者用レインウェア。上下分離なので蒸れず、袖や裾が車輪に巻き込まれません。指や手の関節に不自由があっても、小さな動きで着る、脱ぐ、畳むができます。ジャケットは袖の有無を、ひざ掛けは6つの固定方法から選べます。アームホールがなく、袖を通すストレスがありません。雨天の外出を諦めない、当事者の活動と参加を支援する服です。

税込価格：21,560円

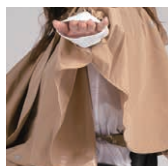

ジャケットにはアームホールがないので空気が中にこもらず、風によるめくれや蒸れが起こりません。



足にしっかりフィットするひざ掛けと、適度な丈・カーブのジャケットは、車輪やキャスタに巻きこまれことはありません。



座位のまま、手の小さな動きで簡単に着脱ができます。



濡れた面を内側にして、手の小さな動きでさっと畳めます。



NACTUS スマートフォンホルダー

スマートフォン端末を収納できます。車いすのレッグパイプなどに巻き付けて装着します。

税込価格：3,080円



NACTUS ドリンクホルダー

500mlサイズのペットボトルの収納などに最適です。車いすのレッグパイプなどに巻き付けて装着します。

税込価格：3,080円



Fギャリー

車いすのパイプへ簡単にに取り付けできます。大きな荷物等を乗せるのに便利です。

サイズ：取付箇所パイプ径(5種類)Φ17・19・21・23・25用
税込価格：8,085円



スマートフラップ

粘着テープ付面ファスナーでアルミサイドガード板に張り付けて使用する、後付式の泥除け(フラップ)です。

税込価格：8,910円



ユニバーサルネット

ペットボトルや小物の置き場所に便利です。面ファスナーで簡単にに取り付けできます。

税込価格：3,960円



NACTUS ホイールバッグ

側面と中仕切りに10mm厚のスポンジを入れた2層構造により、2本のホイールを大切に保護します。

適応車輪：27インチまで・2本収納可能
税込価格：24,200円



スポーツ用車いす関連



バックガード

背の幅決めパイプの長さに合わせてカットし、巻き付けて使用してください。

サイズ：直径5.5×長さ65cm

税込価格：5,060円



NACTUS スポーツワッペン(大)

縦×横:6×26(cm)NACTUSのロゴを刺繍したワッペンです。取り付けには縫い付け加工が必要です。

サイズ：縦6×横26cm

税込価格：3,630円



アクティブスポーツベルト

ネオブレーンゴムに表面生地加工したスポーツ用ベルトです。伸縮性があり、面ファスナー式でどの長さでも止めることができます。

サイズ：M 12×100(cm)、L 12×140(cm)

税込価格：10,120円



リアネット

テニスボールを入れておくことができます。

税込価格：4,730円



スポークカバー

スポーツ車いす用のスポークカバーです。

税込価格：19,800円(1台分)



アウトリガースーパーライト

2本1組。チェアスキー用です。

価格につきましては、販売店にお問い合わせください。

NACTUS Apparel



NACTUS Tシャツ

スポーツ時に最適な、速乾性に優れたTシャツです。NACTUSのロゴ・シンボルマーク入りです。

カラー：ホワイ ト サイズ：M、L、XL

税込価格：5,280円



NACTUS ロングTシャツ

NACTUSのロゴ・シンボルマーク入りです。

カラー：ブラック サイズ：M、L、XL

税込価格：6,380円



NACTUS ジャンパー

NACTUSのロゴ・シンボルマーク入りです。

カラー：ブラック サイズ：M、L、3L

税込価格：19,580円



空気入れ



マキタ MP100DSH

タイヤへのエア注入に便利な充電式空気入れ。充電時間約22分。暗いところでも安心なLEDライト付き。付属アダプターで英式、米式、仏式、ボール、浮き輪などに対応。

最高出力：830kPa(121PSI)

バッテリー：リチウムイオン式電池 1.5Ah

重量：1.1kg(本体+バッテリー)

税込価格：22,330円

フレームカラー

Framecolor

Webサイトで
見る




塗装


マットカラー（艶なし） 新車注文時：0円（非課税）



シャイニーカラー（艶あり） 新車注文時：0円（非課税）

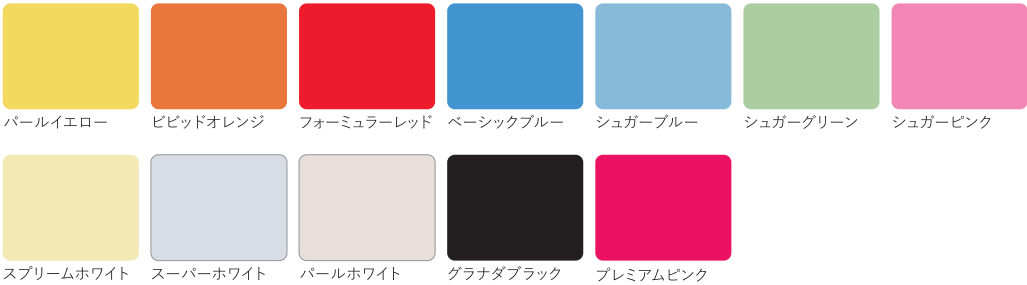


メタリックカラー 新車注文時：5,000円（非課税） * 15,000円（非課税）

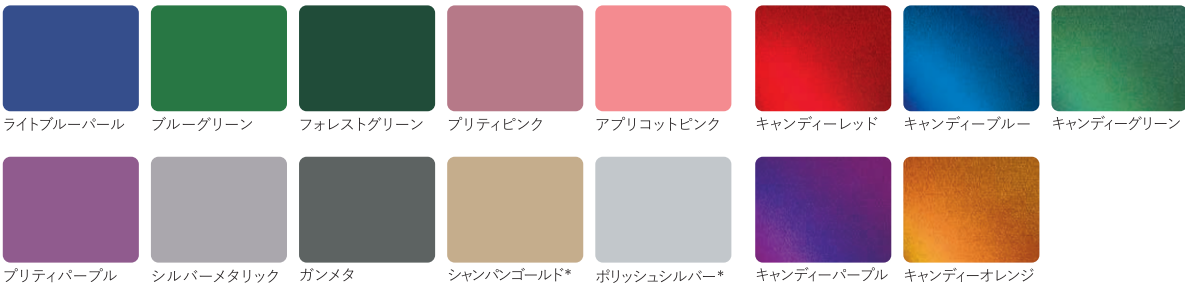


アルマイト

赤・紫・藍・青・金・桃の鮮やかなカラーのアルマイトでは、素地や溶接部の状態が“濃淡の表情”として映し出され、均一な塗装では得られない質感と唯一無二の味わいが得られます。

カラーアルマイト（艶あり） 新車注文時：19,800円（非課税） *スポーツ用車いすは銀・黒のみとなります。

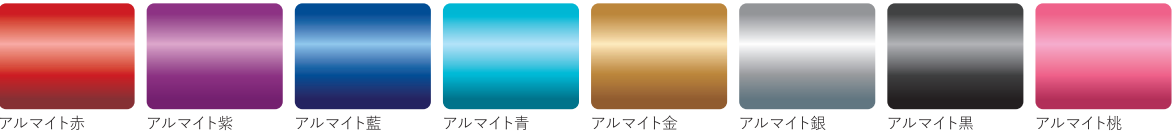

カラーアルマイト（艶なし） 新車注文時：40,000円（非課税） *スポーツ用車いすは銀・黒のみとなります。

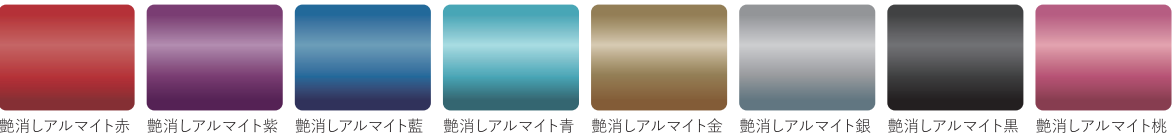

カドワキパウダーコーティング *専用カタログをご確認ください。



ハイクオリティーペイント・パウダーコーティング

パウダーコーティングとは液体ではなく、粉状の塗料を静電気の力で付着させオープンで焼き付けて硬化させる塗装法です。有機溶剤を使わない環境に優しい塗装としてヨーロッパをはじめ世界各国で注目されています。

感動的なクオリティー

カドワキコーティングは創業以来パウダーコーティングにこだわり続け、世界中から塗料を取り寄せテストを繰り返し、厳選した塗料を使用しています。古い塗装を丁寧に剥がし、素地の状態を把握する。適した処理を判断し手間と時間をかけ、根気よく仕上げていく。最高の一品を仕上げるために妥協はしません。そこから生まれてくる仕上がりは感動する美しさがあります。パウダーコート最高の技術をカドワキコーティングからお届けします。